

Réalisation du prélèvement nasopharyngé COVID-19

Modifications mineures notifiées par un trait orange dans la marge gauche

1 PRÉALABLES


- ☞ Vérifier l'identité du patient à prélever auprès d'un médecin du service
- ☞ Le patient a été informé du prélèvement par un médecin
- ☞ Le préleveur informe le patient du déroulement du prélèvement
- ☞ **La semaine** : le laboratoire de Biologie Médicale doit être prévenu de la réalisation du « prélèvement urgent »
- ☞ **Le week-end et les jours fériés laboratoire fermé** : appliquer la procédure en vigueur et signaler « prélèvement urgent » à l'USC
- ☞ Les kits écouillons sont à disposition des IDE qui prélèvent

2 PRÉPARATION DU MATÉRIEL

- ☞ 1 plateau de soin
- ☞ 1 Kit écouillon laboratoire (à récupérer au service de biologie médicale)
- ☞ 2 sachets de transports d'examen
- ☞ 1 seau "blanc" de transport (déposé à l'extérieur de la chambre)
- ☞ 1 masque FFP2
- ☞ 1 protection oculaire
- ☞ 2 paires de gants non stériles à usage unique
- ☞ 1 chiffonnette imprégnée de Détergent Désinfectant pour désinfecter le tube de prélèvement avant son conditionnement dans le premier sachet
- ☞ Bon d'examen à faire remplir par un médecin (Jaune pâle) [BIOL-FQ-0028](#) ou (jaune foncé) [BIOL-FQ-0027](#)



- ☞ Fiche de renseignements cliniques Covid 19 ([BIOL-FQ-0113](#)) à faire remplir par un médecin

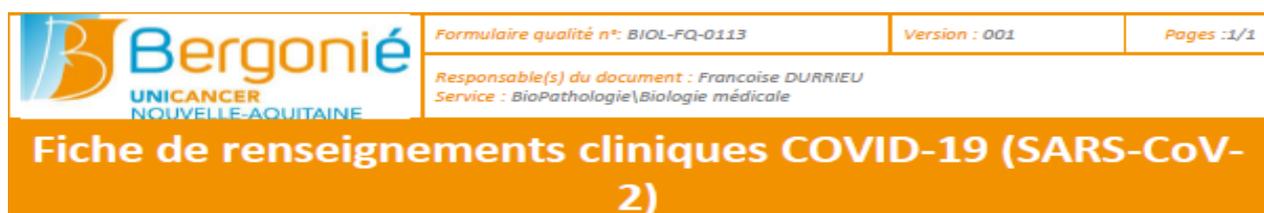

- ☞ 3 Etiquettes identité patient pour étiqueter :

- le tube
- les 2 bords d'examen (à laisser dans un bureau dans l'attente)

👉 1 étiquette "Suspicion agent pathogène" (couleur noire) à coller sur le 2^{ème} sachet de transport

3 APPLICATION CONSIGNES D'HABILLAGE

- 👉 Chariot avec tous les dispositifs d'équipement spécifiques COVID-19
- 👉 Se référer à « Consignes d'habillage » [HYG-FICO-0004](#) qui doit être affichée sur la porte à l'entrée de la chambre
- 👉 Le préleveur revêt les équipements de protection individuelle nécessaires à la réalisation d'un prélèvement selon les consignes d'habillage ([HYG-FICO-0004](#))

Attention : il faut porter un masque FFP2 et une protection oculaire



- 👉 Se référer à « Consignes de déshabillage » [HYG-FICO-0005](#) qui doit être affichée sur la porte à la sortie de la chambre

4 RÉALISATION DU PRÉLÈVEMENT

- 👉 Réaliser une hygiène des mains par friction hydro-alcoolique (HDM) dès l'entrée dans la chambre
- 👉 **Vérifier l'identité du patient** auprès de lui selon le guide pratique d'identitovigilance [IDEN-DCO-0004](#)
- 👉 Réaliser une hygiène des mains par friction hydro-alcoolique (HDM) dès l'entrée dans la chambre
- 👉 Le patient porte déjà un **masque chirurgical**
- 👉 Faire asseoir le patient si possible
- 👉 Maintenir la tête du patient inclinée en arrière
- 👉 Le patient enlève son masque chirurgical
- 👉 Réaliser une hygiène des mains par friction hydro-alcoolique dès l'entrée dans la chambre
- 👉 Mettre une paire de gants
- 👉 Soulever la pointe du nez pour dégager l'orifice narinaire (avec une main)

- 👉 Réaliser le prélèvement nasopharyngé (avec l'autre main)

- Prendre l'écouvillon le plus fin du kit
- Tenir l'écouvillon par la partie distale de la tige
- Insérer l'écouvillon dans la narine sans toucher l'orifice narinaire
- Le pousser délicatement le plus loin possible, **parallèlement au palais** (cf. schéma 1) en suivant le plancher de la fosse nasale
- Le laisser en place **5 secondes en réalisant des petits mouvements de va et vient de gauche à droite**
- Le retirer lentement en lui imprimant un léger mouvement rotatif sans toucher l'orifice narinaire
- Plonger l'écouvillon dans le milieu de transport du tube (cf schéma 2)
- Casser la tige de l'écouvillon (partie sécable)
- Visser le bouchon du tube

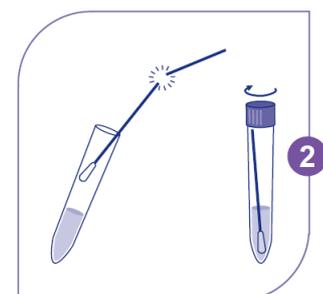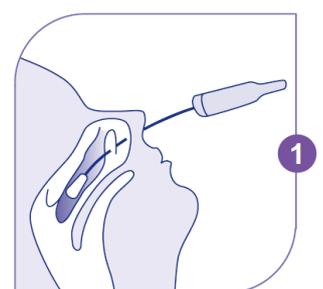

- 👉 Remettre le masque chirurgical au patient

5 PROCEDURE D'EMBALLAGE ET DE TRANSPORT

- ☞ **Désinfecter le tube du prélèvement** avec une chiffonnette imprégnée de Détergent Désinfectant
- ☞ Retrait de la paire de gant ; les jeter avec la chiffonnette usagée
- ☞ Réaliser une HDM
- ☞ Enfiler la 2ème paire de gants (préparée)
- ☞ Mettre le tube de prélèvement dans un sachet dédié et le sceller
- ☞ Mettre ce sachet scellé dans un 2ème sachet et le sceller (double sachet de transport du prélèvement) dans la chambre
- ☞ Mettre le prélèvement en double emballage dans le seau blanc (en attente à l'extérieur de la chambre)

6 APPLICATION DE LA CONSIGNE DE DÉSHABILLAGE

- ☞ Se référer à « Consignes de déshabillage» [HYG-FICO-0005](#) **dans la chambre** qui doit être affichée sur la porte à la sortie de la chambre
- ☞ Réaliser une HDM avant de sortir de la chambre
- ☞ Se référer à « Consignes de déshabillage» [HYG-FICO-0005](#) **en dehors de la chambre** affichée sur la porte à la sortie de la chambre
- ☞ Désinfection de la monture de la visière à usage unique et du plateau de soins

7 TRANSPORT DU PRÉLÈVEMENT

- ☞ Notifier le nom du préleveur, la date et l'heure du prélèvement sur le bon de prescription d'examen
- ☞ Mettre les 2 bons d'examen dans la pochette extérieure du 2ème sachet de transport
- ☞ **PAS d'UTILISATION du PNEUMATIQUE (car suspicion COVID-19)**
- ☞ L'acheminer vers le laboratoire de Biologie Médicale **pendant les horaires d'ouverture de celui-ci** par le préleveur
- ☞ Le service demandeur réalise une demande d'examen sur Hexalis **en période de garde : le code d'examen est covid**
Et acheminement du prélèvement vers l'USC (3^{ème} étage bâtiment A) par un personnel du service demandeur
- ☞ Désinfecter l'intérieur du seau blanc de transport avec une une chiffonnette imprégnée de Détergent Désinfectant